



湿式灰化装置 更新・新規購入キャンペーン 灰化処理にかかる手間と時間を大幅に削減

キャンペーン期間
2024年3月末まで

得 キャンペーン価格でおトク！

この機会にぜひご検討ください



湿式灰化装置 B-440

品番：026674

標準価格：¥2,590,000

キャンペーン価格 **20%OFF**
¥2,070,000
(税込 ¥2,277,000)



K-415 スクラバー

品番：114152330

標準価格：¥1,250,000

キャンペーン価格 **20%OFF**
¥1,000,000
(税込 ¥1,100,000)

得 セット購入でさらにおトク!!

酸を使用した加熱では、スクラバーが必須となります



湿式灰化装置 B-440



K-415 スクラバー

湿式灰化装置セット

品番：35000394

標準価格：¥3,470,000

キャンペーン価格

¥2,430,000 **30%OFF**
(税込 ¥2,673,000)

得 早期割引でさらにさらにおトク!!!

2023年12月15日までに納品完了された方は、さらに**10%割引**

湿式灰化装置 B-440 標準価格 ¥2,590,000 ▶ キャンペーン価格 **¥1,810,000** (税込 ¥1,991,000) **30%OFF**

K-415 スクラバー 標準価格 ¥1,250,000 ▶ キャンペーン価格 **¥875,000** (税込 ¥962,500) **30%OFF**

湿式灰化装置セット 標準価格 ¥3,470,000 ▶ キャンペーン価格 **¥2,080,000** (税込 ¥2,288,000) **40%OFF**

こんなお客様におすすめ

- 重金属試験法を行う方
- 強熱残分試験法を行う方
- 強熱減量試験法を行う方
- ヒ素試験法を行う方
- ICPや原子吸光の前処理を行う方
- 製薬メーカーの品質管理の方
- 化粧品メーカーの品質管理の方
- IQ/OQを必要とされる方
- 磁性ルツボを使われている方
- 白金ルツボを使われている方
- ガスバーナーや電熱器でルツボを使われている方



B-440の特長

1. ハロゲンランプの使用で、素早い昇温

ハロゲンランプを使用していますので、設定温度に素早く到達して加熱を開始します。

2. 9種類のプログラム設定が可能

自動運転により、ルーチン作業の省力化がおこなえます。

3. 各プログラムは最大5段階の時間・温度設定が可能

低温から段階的に昇温させることで、発泡しやすいサンプル等、こまめに火力の調節をしていた作業から解放されます。

4. 突沸の軽減

ルツボ下部をまんべんなく加熱するので、底部だけ加熱されるガスバーナーやホットプレートに比べると突沸しにくくなります。

5. ガラスフードを通して、サンプルの状態を目視可能

6. ガラスフードとスクラバーにより、酸性蒸気から室内環境の汚染を防止

酸性蒸気は、冷却トラップと中和槽で回収し、吸着槽の活性炭で脱臭。硝酸・王水は、反応槽で回収し、酸性蒸気からの汚染を防止。

7. 最大6個のルツボを同時に灰化処理

8. 日本薬局方や食品添加物公定書に対応

9. IQ/OQに対応





10. ドラフトチャンバーを傷めません

酸性ガス、反応性ガスは、K-415スクラバーで中和処理をおこなうので、ドラフトの壁面や天井に付いた酸で腐食されるのを防ぎます。

11. さまざまなルツボに対応

お客様のルツボに合わせた特注のプレート加工が可能

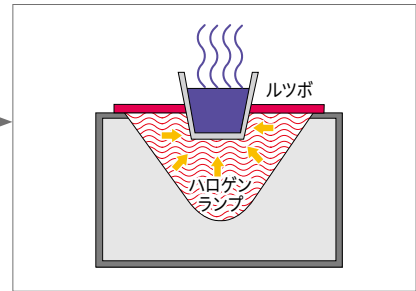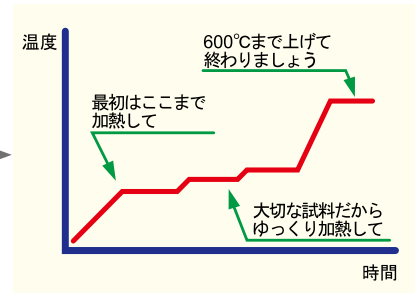

- 強力なポンプ(32L/分)で吸引
- 大容量の3L中和層で中和
- 気液接触面積が大きく効率的
- 簡単処理液交換



Quality in your hands

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
 TEL : 03-3821-4777 FAX : 03-3821-4555
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
 TEL : 06-6195-9241 FAX : 06-6195-9251
 エリア担当駐在：九州 / 中部 / 北海道

お問い合わせ
nihon@buchi.com | www.buchi.com/ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2023年9月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

製品別の
 電子カタログ
 はこちらへ

